


Schwangerschaftstest Frühe Erkennung



Für den Selbsttest. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

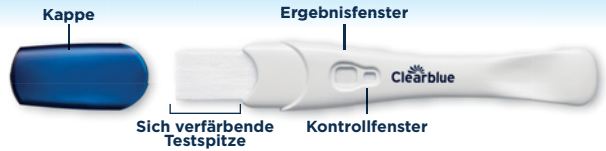

Testen Sie ab
6 Tage
VOR

dem Ausbleiben der Periode!



Wenn Sie früher testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin. Anderenfalls können Sie den Test zu jeder beliebigen Tageszeit durchführen.



Trinken Sie nicht so viel Flüssigkeit, bevor Sie testen.

Ergebnis innerhalb von 10 Minuten ablesen.



1 Durchführung des Tests

Entnehmen Sie den Test aus der Folie, entfernen Sie die Kappe und verwenden Sie den Test umgehend.

Halten Sie die sich färbende Testspitze:

WICHTIG: Die Testspitze wie dargestellt vollständig eintauchen



in
Ihren
Urinstrahl



oder



in eine
Urinprobe



WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich sofort rosa, um zu zeigen, dass sie Urin aufnimmt. **Starten Sie die Zeitmessung, sobald sich die sich färbende Testspitze rosa verfärbt.**

Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage. Wenn die Testspitze sich nicht vollständig rosa färbt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“.

2 Warten



Bereits nach kurzer Zeit kann eine Linie im Kontrollfenster angezeigt werden. Sie müssen jedoch **VOLLE 3 MINUTEN ABWARTEN**, bevor Sie Ihr Ergebnis ablesen. Wenn keine blaue Linie erscheint, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“.

3 Ergebnisse

Schwanger: Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, suchen Sie Ihren Arzt auf.

Abbildung A



Ergebnisfenster
Kontrollfenster

Abbildung B



Abbildung C



Nicht Schwanger (siehe Frage 2).



Wenn Sie sich bei Ihrem Ergebnis nicht sicher sind, siehe Frage 6.

WENN SIE ZWEI LINIEN SEHEN, SIND SIE SCHWANGER, UNABHÄNGIG DAVON, OB EINE DER LINIEN HELLER ODER DUNKLER IST ALS DIE ANDERE. Das Ergebnis ist nur gültig, wenn eine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“. **WICHTIG!** Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie Veränderungen nach dieser Zeit.

Frage und Antworten

1 Mein Ergebnis lautet „Schwanger“. Was soll ich tun?
Suchen Sie Ihren Arzt auf und besprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen. Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist und Sie jedoch später feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind (siehe Frage 7).

2 Mein Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“. Was bedeutet das?
Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug. Testen Sie in drei Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

3 Wie früh kann ich testen?
Dieser Test kann ab 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode (5 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode) verwendet werden. Da jedoch der Hormonspiegel von Frau zu Frau unterschiedlich ist und in der Frühschwangerschaft sehr niedrig sein kann, können Sie schwanger sein und trotzdem ein negatives Ergebnis erhalten. Die folgende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil der Schwangerschaften, die durch Labortests mit Urinproben aus der Frühschwangerschaft festgestellt wurden:

Tage vor dem Ausbleiben der Periode	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Erkannte Schwangerschaften	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	96 %	79 %

4 Wie funktioniert Clearblue?
Der Test erkennt das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin) im Urin. Die Sensitivität des Tests liegt bei 10 mIU/ml. Labortests haben gezeigt, dass der Test ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode zu über 99 % zuverlässig ist.

5 Kann die Einnahme von Medikamenten oder gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?
Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen. Medikamente, die hCG enthalten, und bestimmte seltene Erkrankungen können zu falschen Positiv-Ergebnissen führen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. Hormontherapien mit Clomiphencitrat,

gängige Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antiabypille sollten **KEINE** Auswirkungen auf den Test haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

6 Was ist, wenn ich mir bei meinem Testergebnis unsicher bin?
Wenn Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Test zwei blaue Linien sehen, sind Sie schwanger, ganz egal, wie schwach oder dunkel die Linien sind.

Ergebnis „Schwanger“

Abbildung A Sie erhalten dieses Testergebnis, wenn Sie vor Fälligkeit der Periode testen und Ihre hCG-Konzentrationen noch relativ niedrig sind.

Abbildung B Ihr Testergebnis könnte so aussehen, wenn Sie kurz vor oder nach Fälligkeit Ihrer Periode testen, da die hCG-Konzentrationen relativ niedrig sein können.

Abbildung C Sie erhalten dieses Testergebnis möglicherweise, wenn Sie einige Tage nach dem Ausbleiben der Periode testen, da die hCG-Konzentrationen höher sind.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.

7 Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?

Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist und Sie jedoch später feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind. Dies wird als „früher Schwangerschaftsverlust“ bezeichnet, was nicht selten vorkommt und ungefähr bei 1 von 4 Schwangerschaften auftritt. Die meisten Frauen können anschließend eine komplikationsfreie Schwangerschaft haben.


8 Sollte ich bestimmte Vorkehrungen treffen, wenn ich plane, schwanger zu werden?

Es lohnt sich, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Viele Ärzte informieren darüber, dass die Einnahme von Folsäure oder pränatalen Vitaminpräparaten, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie das Halten eines gesunden Körpergewichts sich positiv auswirken können. Sie können auch eine Ovulationstest anwenden, um festzustellen, wann Ihre fruchtbarsten Tage sind. Clearblue bietet ein Sortiment an Tests an, die Ihnen dabei helfen, Ihre Chancen, schwanger zu werden, zu erhöhen.

! Testfehler

Die sich färbende Testspitze färbt sich nicht vollständig rosa.
Sie haben möglicherweise nicht genügend Urin aufgetragen. Wenn die Kontrolllinie innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests zu sehen ist, haben Sie jedoch den Test korrekt durchgeführt.

Innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests erscheint keine blaue Linie im Kontrollfenster.
Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt, weil möglicherweise zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde. Testen Sie erneut mit einem neuen Test und befolgen Sie die Anweisungen genau.

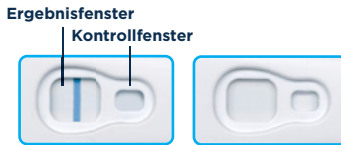

www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359 Anrufe sind kostenlos. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Enthält Kleinteile. Keine Bestandteile dieses Geräts schlucken. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen. Melden Sie jegliche Verletzung, die durch die Verwendung dieses Produkts von Clearblue verursacht wurde.

179 % der Ergebnisse „Schwanger“ können 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode erkannt werden (5 Tage vor Fälligkeit der Periode).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St. Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.

LOT	Batch-Code	IVD	Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik	Hersteller
Verfallsdatum	Temperaturbegrenzung 2 °C bis 30 °C	Nicht wiederverwenden		

Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2021 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

Anweisungen für Clearblue Frühe Erkennung mit dem Aufdruck „CB14“ auf der Verpackung. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik. Nicht zur internen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Entsorgung im normalen Hausmüll. Gerät nicht auseinandernehmen.