


Schwangerschaftstest Schnelle Erkennung

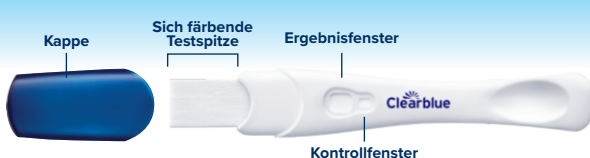

Für den Selbsttest. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen nicht automatisierten Selbsttest für die Heimanwendung zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin einer Frau zur Feststellung einer Schwangerschaft. Für die Anwendung ab 4 Tagen vor dem Fälligkeitstag der Periode vorgesehen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Anleitung für einen Test mit dem Aufdruck „CB11012“ auf der Verpackung. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschließlich zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Nicht zur inneren Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Sobald die Folie geöffnet ist, sofort verwenden. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Im normalen Hausmüll entsorgen. Enthält Kleinteile. Keine Bestandteile dieses Geräts schlucken. Bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt aufsuchen. Melden Sie jegliche Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht wurden, an Clearblue und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats.

Ab dem Fälligkeitstag
Ihrer Periode
**über 99 %
zuverlässig**

+ oder **-** Leicht
ablesbare
Ergebnisse

**Nehmen Sie nicht
übermäßig viel
Flüssigkeit
zu sich,
bevor Sie testen**

Ergebnis
innerhalb
von 10 Minuten
ablesen



1 Durchführung des Tests

Erforderliche, aber nicht enthaltene Materialien: Sauberer, trockener Behälter und eine Stoppuhr. Entnehmen Sie den Test aus der Folie, entfernen Sie die Kappe und verwenden Sie den Test umgehend. Halten Sie die sich färbende Testspitze für **5 Sekunden**:



**5
Sekunden**
in Ihren
Urinstrahl

oder



**5
Sekunden**
in eine
Urinprobe

WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich sofort rosa, was anzeigt, dass sie Urin aufnimmt. **Trotzdem MÜSSEN Sie die Spitze für volle 5 Sekunden in Ihren Urin halten.**

Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage. Wenn die Testspitze sich nicht vollständig rosa färbt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“.

WICHTIG: Die Testspitze wie dargestellt vollständig eintauchen

2 Warten



- Das Ergebnis „Schwanger“ (+) kann innerhalb von 1 Minute erscheinen, wenn der Test nach dem Ausbleiben der Periode durchgeführt wird (am Tag, nachdem Sie Ihre Periode erwartet haben).
- Warten Sie 3 Minuten, bis sich das Ergebnis „Nicht Schwanger“ (–) bestätigt.

Wenn keine blaue Linie erscheint, lesen Sie den Abschnitt „Testfehler“.

3 Ergebnisse

Schwanger – Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, suchen Sie Ihren Arzt auf (siehe Frage 1)

Abbildung A



Ergebnissenster
Kontrollfenster

Abbildung B



Abbildung C



Wenn Sie sich bei Ihrem Ergebnis nicht sicher sind, siehe Frage 6.

Nicht Schwanger
(siehe Frage 2).



Das Ergebnis ist nur gültig, wenn eine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie bitte den Abschnitt „Testfehler“.

WICHTIG! Lesen Sie Ihr Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach der Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie Veränderungen nach dieser Zeit.

? Fragen und Antworten

- Mein Ergebnis lautet „Schwanger“. Was soll ich tun?**
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mit ihm das weitere Vorgehen zu besprechen. Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist und Sie jedoch später feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind (siehe Frage 7).
- Mein Ergebnis lautet „Nicht Schwanger“. Was bedeutet das?**
Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug. Testen Sie in drei Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Ich bin mir nicht sicher, wann der Fälligkeitstag meiner erwarteten Periode ist. Woher weiß ich, dass ich den Test zum richtigen Zeitpunkt mache?**
Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen. Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monate ausgehen, bevor Sie testen.
- Wie funktioniert Clearblue?**
Der Test weist hCG im Urin nach Aufbringen der Probe nach. Die visuellen Ergebnisse zeigen ab dem Tag, an dem Sie Ihre Periode erwarten, mit einer Zuverlässigkeit von über 99 % an, ob hCG nachgewiesen wurde.
- Kann die Einnahme von Medikamenten oder gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?**
Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen.
Medikamente, die hCG enthalten, und bestimmte seltene Erkrankungen können zu falschen Positiv-Ergebnissen führen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen.
Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie fälschlicherweise das Ergebnis „Schwanger“ erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind.
Hormontherapien mit Clomiphencitrat, gängige Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antibabypille sollten **KEINE** Auswirkungen auf den Test haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

- Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?**
Für das Ergebnis „Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach Testdurchführung eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Pluszeichen (+) im Ergebnissenster erscheinen.

Ergebnis „Schwanger“

Abbildung A: So kann es aussehen, wenn Sie schwanger sind und mehrere Tage nach dem Ausbleiben der Periode testen, da der hCG-Spiegel dann höher ist.

Abbildung B: Ihr Testergebnis könnte so aussehen, wenn Sie kurz vor oder nach Fälligkeit Ihrer Periode testen, da die hCG-Konzentrationen relativ niedrig sein können.

Abbildung C: Dies zeigt immer noch das Ergebnis „Schwanger“.

Wenn die Linien im Ergebnissenster ein Pluszeichen (+) bilden, lautet das Ergebnis „Schwanger“, unabhängig davon, ob eine der Linien heller oder dunkler ist als die andere. Für das Ergebnis „Nicht Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Minuszeichen (–) im Ergebnissenster erscheinen.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen, und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.

- Zuerst wurde das Testergebnis „Schwanger“ angezeigt, doch bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?**
Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist und Sie jedoch später feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind. Die Ursache kann ein „früher Schwangerschaftsverlust“ sein, was ungefähr bei 1 von 4 Schwangerschaften auftritt. Die meisten Frauen haben anschließend eine gesunde Schwangerschaft.
- Sollte ich irgendetwas tun, wenn ich eine Schwangerschaft plane?**
Es ist eine gute Idee, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Viele Ärzte informieren darüber, dass die Einnahme von Folsäure oder pränatalen Vitaminpräparaten, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie das Halten eines gesunden Körpergewichts sich positiv auswirken können. Sie können auch einen Ovulationstest anwenden, um festzustellen, wann Ihre fruchtbarsten Tage sind. Clearblue bietet ein Sortiment an Tests an, die Ihnen dabei helfen, Ihre Chancen, schwanger zu werden, zu erhöhen.

! Testfehler

Die sich färbende Testspitze färbt sich nicht vollständig rosa. Sie haben möglicherweise nicht genügend Urin aufgetragen. Wenn die Kontrolllinie innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests zu sehen ist, haben Sie jedoch den Test korrekt durchgeführt.

Innerhalb von 10 Minuten nach Durchführung des Tests erscheint keine blaue Linie im Kontrollfenster. Der Test wurde nicht korrekt durchgeführt, weil möglicherweise zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde. Testen Sie erneut mit einem neuen Test und befolgen Sie die Anweisungen genau.



Substanzen, die die Leistung des Tests nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch für hohe Werte des hCG-beta-Core-Fragments, sehr hohe Werte von intaktem hCG, eine Reihe von spezifischen Gravitäten oder den pH-Wert des Urins. Eine Präzisionsstudie hat gezeigt, dass die analytische Empfindlichkeit des Geräts 25 mIU/ml beträgt.

IVD	Medizinisches Produkt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-Code
	Hersteller		Verfallsdatum
	Nicht wiederverwenden		Temperaturbegrenzung 2 °C – 30 °C
EC REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.

Literatur

1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnath C und Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7): 661–669.
Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2025 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

www.clearblue.com
Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 bis 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359

Anrufe sind kostenlos. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Leistungsmerkmale

Klinische Leistung:

Klinische Leistungstests haben gezeigt, dass der Test mit einer Zuverlässigkeit von >99 % den Schwangerschaftsstatus ab dem Fälligkeitstag der Periode bestimmt.

- Das Produkt war in den Händen der Laienanwenderinnen zu über 99 % zuverlässig, wenn es um ihren Schwangerschaftsstatus ging (getestet von 120 Frauen).
- In einer Studie, in der 600 Proben getestet wurden, war das Produkt ab dem Fälligkeitstag der Periode zu >99 % zuverlässig.
- Klinische Spezifitätstests mit prä-, peri- und post-menopausalen Proben (600 Proben) bestätigten ≥ 99 % Spezifität.

Analytische Leistung:

Die analytische Spezifität wurde durch Tests des Produkts mit potenziell störenden oder kreuzreagierenden Substanzen festgestellt. Die Ergebnisse bestätigten, dass hohe Konzentrationen dieser